

気相式液体窒素輸送容器
CS-01S / CS-01 / CS-05 **-196℃LN₂**
iPS輸送容器 実運用開始

細胞、ティッシュの搬送に最適です。
気相式のため液体窒素がもれ出る心配がありません。
衝撃防止マット、断熱ショルダーバック付

CS-01 サイズ: 27cm×27cm×41cm
(断熱ショルダーバックを含む)
軽 量: 7kg (LN₂吸着時)
長時間: -180℃以下 3日



CS-01

CS-05

臍帯血の輸送に多数使用されております。

品名		モデル	外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			重量 (kg)	保持日数	価格
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
セルシッパー	小	CS-01S	φ195	—	296	φ115	—	176	5	-180℃以下2日間	¥750,000
		バッグ	240	240	380	230	230	370	—	—	—
	中	CS-01	φ230	—	320	φ129	—	195	7	-180℃以下3日間	¥780,000
		バッグ	270	270	410	260	260	390	—	—	—
	大	CS-05	φ308	—	383	φ195	—	242	13	-180℃以下3日間	¥810,000
		バッグ	340	340	420	330	330	410	—	—	—
ホルダー		CS-1H	—	—	—	—	—	—	—	—	¥10,000
データロガー		—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥72,500

蓄冷材凍結庫
ECI-40L423 **-40℃~-20℃**

- ・棚4枚 蓄冷材用収納力ゴ8個付
- ・専用バスケットに上記蓄冷材144個収納可能
(500g。凍結所要時間は約24時間)
1300g版は112個収納可能
- ・横吹冷却で蓄冷材凍結効率性アップ(強制冷却方式)

モデル	ECI-40L423
外形寸法 (mm)	W750×D800×H1905
冷却性能 (℃)	-40~-20
内容積 (ℓ)	415
製品重量 (kg)	143
定格出力 (W)	1100
電 源	三相200V 50/60Hz
	電源コード・プラグ 接地形3極 20A
定 価	¥1,200,000



安全に関する注意 【ご使用に際して】 ●ご使用前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。 ●コンデンサーの掃除は最低月一回は行ってください。
【据え付けに際して】 ●据え付けは、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。

免責事項 ●収納物の保証につきましては、いかなる状況でありましても対象となりませんので、ご了承下さい。

EBAC 株式会社 荏 原

本 社 〒152-0023 東京都目黒区八雲1丁目6番5号
TEL. 03(3724)3681 (代表) FAX. 03(3725)0621

荏原KOREA
10F, Jaram building 78 Mapo-daero Mapo-Gu Seoul Korea 121-815
TEL. +82-70-8222-1049

URL <http://www.ebac.co.jp>
E-mail ebara@ebac.co.jp
f www.facebook.com/ebara1966




本社にて認証取得

お問い合わせについて お客様からいただきました個人情報は、お客さまへの回答に使用させていただきます。他の目的には使用いたしません。

- 仕様・価格・材質等は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログ記載製品の表示価格には消費税・運搬・搬入・廃棄・設置に関わる工事等の費用は含まれておりません。

代理店

EBAC

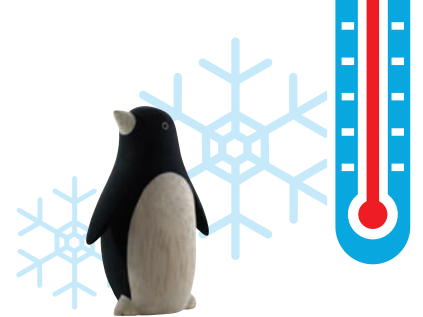


定温安定輸送バッグ



株式会社 荏 原

定温輸送バッグ
EBAG (エバッグ) EBTシリーズ

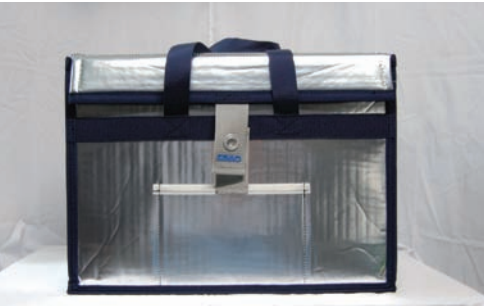

断熱材の熱伝導率		
断熱効果	断熱材名称	熱伝導率 W/m・K
熱伝導率が 小さいほど 断熱効果は高い ↑ 熱伝導率が 大きいほど 断熱効果は低い	真空断熱材	0.0012
	フェノールフォーム	0.02
	硬質ポリウレタン	0.024
	発泡ポリスチレン	0.028
	発泡ポリエチレン	0.036
	発泡ポリプロピレン	0.04
	ガラス繊維	0.042

E004: Insulated containers

PQS code: E004/042

Dwscripton: Cold box Short range

Manufacturer's reference: EBT-30

Manufactured in: Japan

Company: EBARA Co. Ltd.

Address: 1-6-5 Yakumo, Meguro-ku 152-0023 Tokyo Japan

Telephone: +81 3 3724 3681; +82 70 8222 1049

Email: ebara@ebac.co.jp, kjongwon@ebac.co.jp

Web address: www.ebac.co.jp

WHO Performance Quality and Safety (PQS) 認証取得



安心のセフティロックシステム
同時に伝票ポケットもロックし輸送中の紛失を防止

モデル	EBT-08	EBT-20	EBT-30	EBT-10H
外形寸法 (mm)	W335×D225×H315	W405×D335×H335	W485×D365×H355	W390×D110×H280
内形寸法 (mm)	W250×D140×H230	W320×D250×H250	W400×D280×H270	
内容積 (ℓ)	8	20	30	10
外装	-	-	-	アルミ蒸着シート
断熱材	フェノールフォーム	フェノールフォーム	フェノールフォーム	-
重量 (kg)	1.1	1.5	2	0.235
定価	¥18,000	¥19,000	¥20,000	¥4,500

封印具
EBARING (エバリング)

Step1 送付伝票の空欄部分に封印具についているバーコードシールを貼り付ける

Step2 封印具を封緘止めの鳩目部に通し封印

Step3 開封時、伝票に貼り付けたシールの番号と封印具の番号を確認

モデル	定価		
	100本	500本	1,000本
ERG-001	2,700	12,000	22,000

院内輸送バッグ
EBT-10H

病院内での血液・試薬の搬送にご使用いただいています。
オリジナルシールや刺繍をお客様のご要望に合わせて入れることが可能です。



驚き！輸送技術

血液の定温輸送／在原

「さっと運べる」要望に応える

個性 発信

話題の商品

日刊工業新聞 2013年1月10日 掲載

新製品フラッシュ

血液輸送用バッグ

「さっと運べる」要望に応える

個性 発信

話題の商品

日刊工業新聞 2014年4月21日 掲載

蓄冷材 ETBシリーズ -30℃~+22℃

血小板製剤用 (+22℃)



品名	サイズ (mm)	重量 (g)
ETB-22-200	240 x 130	200
ETB-22-500	310 x 240	500
ETB-22-500	390 x 270	500
ETB-22-800	390 x 270	800
ETB-22-1000	390 x 270	1000

赤血球製剤用 (+4℃)



品名	サイズ (mm)	重量 (g)
ETB-4-200	240 x 130	200
ETB-4-500	310 x 240	500
ETB-4-500	390 x 270	500
ETB-4-800	390 x 270	800
ETB-4-1000	390 x 270	1000
ETB-4-300	300 x 175	300


血漿製剤用 (-30℃)



品名	サイズ (mm)	重量 (g)
ECI-30-500 ハード 500g (-30℃)	140 x 220	500
ECI-30-1300 ハード 1300g (-30℃)	180 x 280	1300

EBT バッグカスタマイズ

バッグ仕様変更

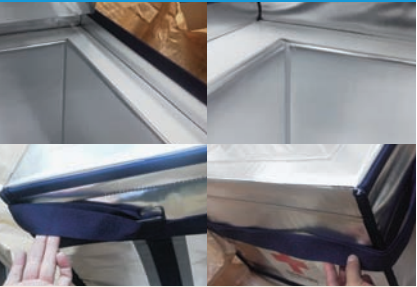


バッグの仕様をカスタマイズ
カスタマイズ事例として

- 転倒防止枠
- ショルダーベルト
- ショルダー縫付部補強
- 書類ホルダサイズ変更

お客様のご要望に応じた仕様への変更を承ります。

特注品バッグ

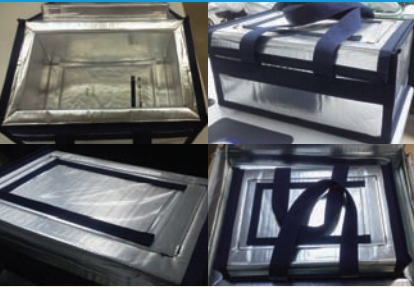

用途に応じたサイズのバッグ製作
作例として

- 血小板製剤用バッグ (写真)

血小板製剤がきれいに納まる深さのバッグです。

既存のEBTシリーズ以外のサイズも承ります。

バッグ付属オプション



バッグ用に豊富なオプションを用意
作例として

- 蓄冷材用プラスチックダンボールケース (写真)
- アルミ蒸着角底保冷袋 (写真)
- 蓄冷材用シール製作 etc

ご要望に応じたオプションをご用意いたします。

EBT 真空断熱BOX



EBT-20・30に入れるだけで
保冷・保温性能が飛躍的に向上します。
長時間の搬送にご使用下さい。
特注サイズにも対応致します。

モデル	EVIP-20	EVIP-30
外形寸法 (mm)	W320×D250×H250	W400×D280×H270
内形寸法 (mm)	W290×D220×H220	W370×D250×H240
定価	オープン	オープン